


Массажер спины и плеч модель: E-1160

ВНИМАНИЕ!!! Перед использованием данного массажёра проконсультируйтесь с врачом!!!

Пульт дистанционного управления
и обозначение его кнопок

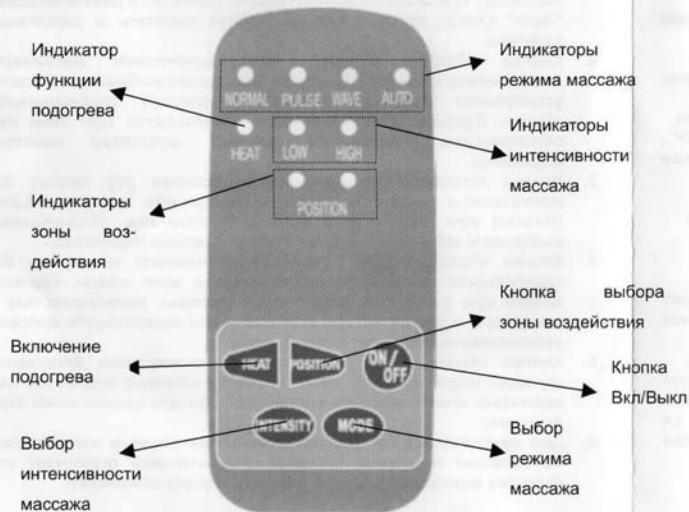

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ МАССАЖЕРА

- 4 электрических вибромотора обеспечат мягкий успокаивающий массаж мышц спины и плеч
- Возможность выбора 3 режимов массажа
- Функция подогрева
- Два уровня интенсивности массажа
- Питание через адаптер от сети 220В
- 15-ти минутный таймер отключения



рис.1

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Внимание! Перед использованием массажёра

внимательно прочтите данную инструкцию.

- Электропитание массажера осуществляется через входящий в комплект поставки 12В адаптер от сети 220В. Перед включением массажера убедитесь, что его штекер адаптера присоединен к разъему массажера.
- Разместите массажер на спине как показано на рис.1 и закрепите его с помощью крепёжных ремней, застегнув их крест накрест на груди.
- После использования и перед чистой всегда отключайте массажер от электросети, вынув вилку питания адаптера из электросети.
- Если массажер попал в воду – немедленно обесточьте его, вынув вилку питания адаптера из электросети.
- Никогда не оставляйте включенный массажер без присмотра.
- Пользуйтесь массажером только в помещениях.
- Не переносите массажер, держа его за шнур питания
- Держите шнур питания массажера вдали от источников тепла.
- Не оставляйте массажер без присмотра в рабочем состоянии, если рядом находятся дети, больные или беспомощные люди.
- Массажер – не игрушка. Не давайте детям пользоваться или играть им.
- Не включайте массажер в помещениях после распыления в них спреев, аэрозолей и газов.
- Не прикладывайте массажер к глазам и другим чувствительным областям тела.
- Для полного отключения массажера выключите его, нажав кнопку "ON/OFF", убедитесь, что он выключен и затем выньте вилку адаптера из сетевой розетки и затем отсоедините гнездо питания массажера от разъема питания адаптера.
- Держите шнур питания вдали от нагревых поверхностей.
- Используйте массажер только по его прямому назначению. Не используйте части массажера в комплекте с другими приборами.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Если у Вас есть какое-либо беспокойства относительно состояния Вашего здоровья, то до того как пользоваться данным массажером, в обязательном порядке проконсультируйтесь с врачом.
- Лицам с электрокардиостимуляторами запрещено использование массажера.
- Не используйте массажер при имеющихся или возникающих при его использовании мышечных болях. Немедленно прекратите его использование и проконсультируйтесь с врачом, т.к подобное состояние может явиться симптомом более серьезного заболевания.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Хранение: Храните массажер в упаковочном коробе в прохладном, сухом и чистом месте. Исключите контакт массажера с жующими и режущими предметами, которые могут повредить его. Не оборачивайте шнур питания массажера вокруг его корпуса. Не переносите массажер, держа его за шнур питания.

Чистка:

- Перед чисткой массажера убедитесь в том, что он полностью обесточен и охладился после его использования.
- Не очищайте массажер жидкостями и жидкими моющими средствами. Чистку поверхности массажера осуществляйте, протирая её губкой или тампоном, слегка увлажнённых моющим средством или мыльной пеной. После очистки массажера просушите его, протерев сухой мягкой тканью.
- Для чистки массажера не пользуйтесь абразивными очистителями, щетками, бензином, керосином, средствами для очистки стекол и полировки мебели, растворителями красок и водой с температурой выше +40 градусов Цельсия.

Обозначения и функции кнопок пульта ДУ:

1. Кнопка «On/Off» (Вкл/Выкл): Нажав эту кнопку Вы включите массажер. При этом он автоматически перейдет в режим массажа «Auto» (Авто), когда 4 мотора начнут работать в различных режимах.
2. Кнопка «Mode» (Режим): при включенном массажере, попеременно нажимая эту кнопку Вы можете выбрать по Вашему усмотрению следующие режимы «Normal» (Нормальный), «Pulse» (Пульс), «Wave» (Волна) и «Auto» (Авто), при этом над обозначением выбранного режима загорается красный индикатор.
3. Кнопка «Intensity» (Интенсивность): нажимая эту кнопку Вы попеременно можете выбрать интенсивность массажа: «Low» (Низкая) или «High» (Высокая), при этом над обозначением выбранной интенсивности загорается красный индикатор.
4. Кнопка «Position» (Зона воздействия): нажмите кнопку и Вы задействуете моторы, расположенные в зоне спины, нажмите кнопку еще раз и Вы задействуете моторы, расположенные в зоне плеч, нажмите кнопку еще раз и Вы задействуете моторы, расположенные в зонах спины и плеч.
5. Кнопка «Heat» (Подогрев): нажмите кнопку для включения функции подогрева, при этом загорится красный индикатор над надписью «Heat» нажмите кнопку еще раз для выключения этой функции.
6. Для предотвращения злоупотребления данным массажером, он оснащен таймером, который автоматически отключает все функции массажера через 15 минут после его включения.