

ДЕЛЬФИН



Трехрежимный компрессорный ингалятор (небулайзер) **ДЕЛЬФИН** производства фирмы «Флаем Нуова» (Италия) комплектуется двумя типами распылителей («Рapidфлаем 2» и «Рapidфлаем 6 плюс») и рекомендуется для профилактического и лечебного использования в медицинских учреждениях и в домашних условиях.

ДЕЛЬФИН

ДЕЛЬФИН

Предназначен для проведения небулайзерной аэрозольтерапии; применяется при лечении острых и хронических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей:

- фарингита, ларингита
- риносинусита, трахеита
- бронхита, бронхиальной астмы
- пневмонии, туберкулеза легких
- хронических обструктивных заболеваний легких
- послеоперационной дыхательной недостаточности


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание - 220/230 В ~50 Гц
Мощность - 140 ВА
Максимальное давление воздуха - 2,5 бар
Расход воздуха -10 л/мин
Режим работы и размер частиц аэрозоля:
режим 1 - 0,8-2,0 мкм, (распылитель «Рapidфлаем 2»)
режим 2 - 2,0-10,0 мкм, (распылитель «Рapidфлаем 2»)
режим 3 - в среднем 3,6 мкм, (распылитель «Рapidфлаем 6 плюс»)

Время непрерывной работы - 60 мин
Габаритные размеры - 18x30x10 см
Вес - 2,1 кг
Расход лекарства при работе распылителей в непрерывном режиме:
режим 1 - 0,25 мл/мин
режим 2 - 0,51 мл/мин
режим 3 - 0,42 мл/мин

Инструкция по эксплуатации ингалятора (небулайзера)

ДЕЛЬФИН

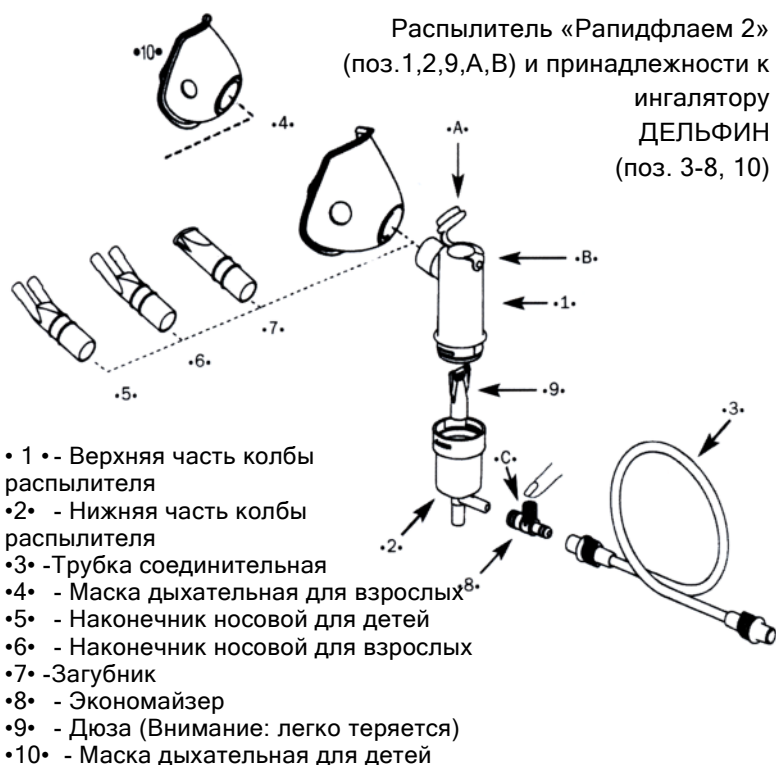

Порядок работы с распылителями «Рapidфлаем 2», «Рapidфлаем 6 плюс» и принадлежностями одинаков за исключением пункта «ж» настоящей инструкции.

Сборку производить при выключенном аппарате.

а - откройте колбу для распыления лекарств (распылитель) путем поворота ее верхней части (1) вокруг собственной оси против часовой стрелки.

б - залейте по делениям необходимое количество лекарства в нижнюю часть колбы (2). Одно деление - 1 мл. в - закройте колбу путем поворота ее части (1) вокруг собственной оси по часовой стрелке, г - подсоедините распылитель к штуцеру аппарата при помощи трубки (3). д - установите экономайзер (8), если это необходимо.

Экономайзер используется для экономии лекарственного препарата.

В случае применения экономайзера пациент закрывает в нем отверстие «С» пальцем при вдохе и открывает при выдохе.

е - к боковому отверстию в верхней части колбы подсоедините желаемые принадлежности: маски (4) или (10), наконечники носовые (5) или (6), загубник для вдыхания ртом (7) к «Рapidфлаем 2» и (11, 12) к «Рapidфлаем 6 плюс».

ж - при применении распылителя «Рapidфлаем 2» используется заглушка «А» в верхней части колбы для выбора необходимой дисперсности облака аэрозоля.

Если отверстие «В» в верхней части колбы закрыто заглушкой «А» (режим 1), дисперсность лекарственных частиц - от 0,8 до 2,0 мкм, что обеспечивает ингаляцию нижних дыхательных путей. Если отверстие «В» открыто (режим 2), то дисперсность аэрозоля составляет 2,0 -10,0 мкм, и этот режим используется для ингаляции верхних дыхательных путей, з - включите аппарат.


и - по окончании процедуры промойте принадлежности под струей воды и дезинфицируйте моющим средством, к - при необходимости принадлежности 1, 2, 9, 11, 12 можно стерилизовать в автоклаве (режим: температура-121°С, давление-0,1 МПа) в течение 25 минут. При этом следует удалить заглушку А, клапаны АА и ВВ.

Один раз в 2-3 месяца необходимо обрабатывать воздушный фильтр, расположенный рядом со штуцером ингалятора, к которому подсоединяется трубка соединительная (3), моющим средством с последующей промывкой в чистой проточной воде. Фильтр перед установкой в аппарат сушить не менее 2 часов при комнатной температуре.

Максимальное время работы ингалятора без выключения - 60 минут, после 20-минутного перерыва он снова готов к работе.

ВНИМАНИЕ!

Возможна поставка дополнительного количества принадлежностей (поз. 1+2+9,3,4,5,6,7,8,10,11,12).

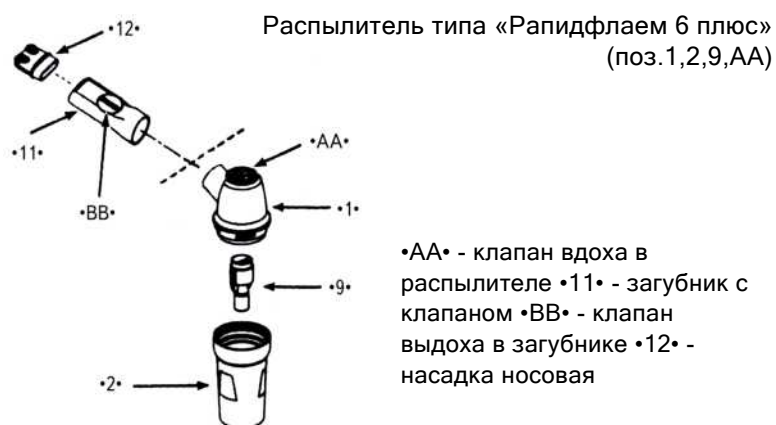

Использование распылителя «Рapidфлаем 6 плюс» с загубником «11» позволяет более экономично расходовать лекарства за счет поочередной работы клапанов «АА» и «ВВ» при вдохе и выдохе пациента.

Заказать данный товар и его комплектующие можно на сайте компании ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

Тел./факс 8(495) 626-57-89
Эл. почта: info@medrk.ru



Гарантийное (5 лет) и сервисное обслуживание.